


- Operation equipment -

選べる計装機器


液晶タッチパネル式 (オールインワン)

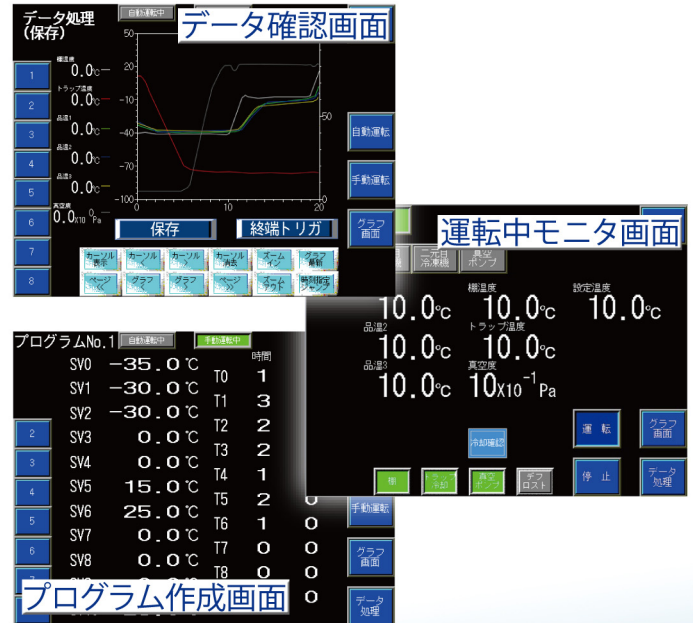

= 特徴 =

- ① 全ての操作が画面一つで行えます。
- ② タッチパネル式なので、変更したい数値などを直観的に触れば、簡単にセットすることが出来ます。
- ③ データはCSVファイルに変換し、USBメモリで取出しが可能です。
専用ソフトを必要としないので、汎用の表計算ソフトなどで閲覧・編集が可能です。

各機器独立タイプ

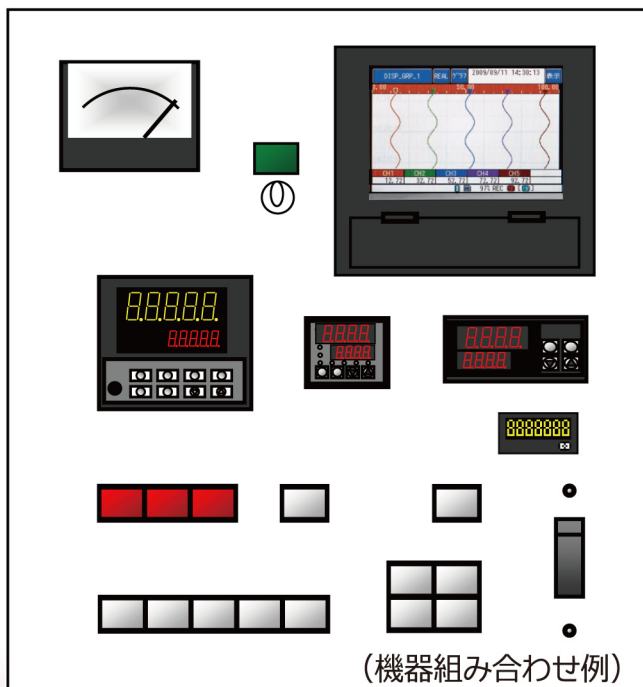

主構成機器

- ① 真空計
真空度を計測します。(ピラニ真空計 Pa表示)
- ② 記録計
ペーパー式・ペーパーレス共に対応可
真空度・温度を必要点数記録します。
- ③ プログラム温度調節器
自動運転時のプログラム作成・指示を行います。
- ④ トラップ温度指示計
トラップ温度をモニターします。
- ⑤ トータルタイムカウンター
装置のトータル運転時間を表示します。
- ⑥ その他
安全警報装置・照光ランプなど。

各メーカー機器対応
トレーサビリティ・校正証明書発行可